



Sistemos architektūra

Šiame dokumente pateikiama išsami „Accu-Chek Care“ sistemos architektūros apžvalga.

„Accu-Chek Care“ yra AWS („Amazon Web Services“) debesų kompiuterijos sprendimas, kuris yra suderinamas su dauguma rinkoje esančių diabeto prietaisų.

- „Accu-Chek Care“ susideda iš skirtingų interneto portalų ir kompiuterio programų, kurios leidžia naudotojams įkelti klinikinius duomenis į sistemą vėlesnei peržiūrai ar analizei
- Vidinis kompiuteris (serveris) apima visą verslo logiką ir teikia duomenis naudotojo sąsajai per gerai apibrėžtus ir versijomis suskirstytus programų sąsajos (API) galinius taškus
- API tvarkyklė siūlo paslaugų katalogą ir yra pirmasis saugumo lygmuo
- Duomenys išlieka saugojimo sluoksnyje ir jiems užtikrinama tinkama saugojimo politika, pagrįsta šalies reikalavimais.
- Duomenys pseudonimizuojami ir šifruojami, tiek kai yra neperduodami, tiek kai yra perduodami. Taikomi griežti šifravimo metodai, kad debesijos-prieglobos paslaugų teikėjas (AWS) negalėtų pasiekti jokių atvirų duomenų
- „Accu-Chek Care“ yra IIa klasės medicinos priemonė pagal ES medicinos priemonių reglamentą 2017/745. Atitinkama „Roche“ plėtros organizacija yra sertifikuota pagal ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27701.

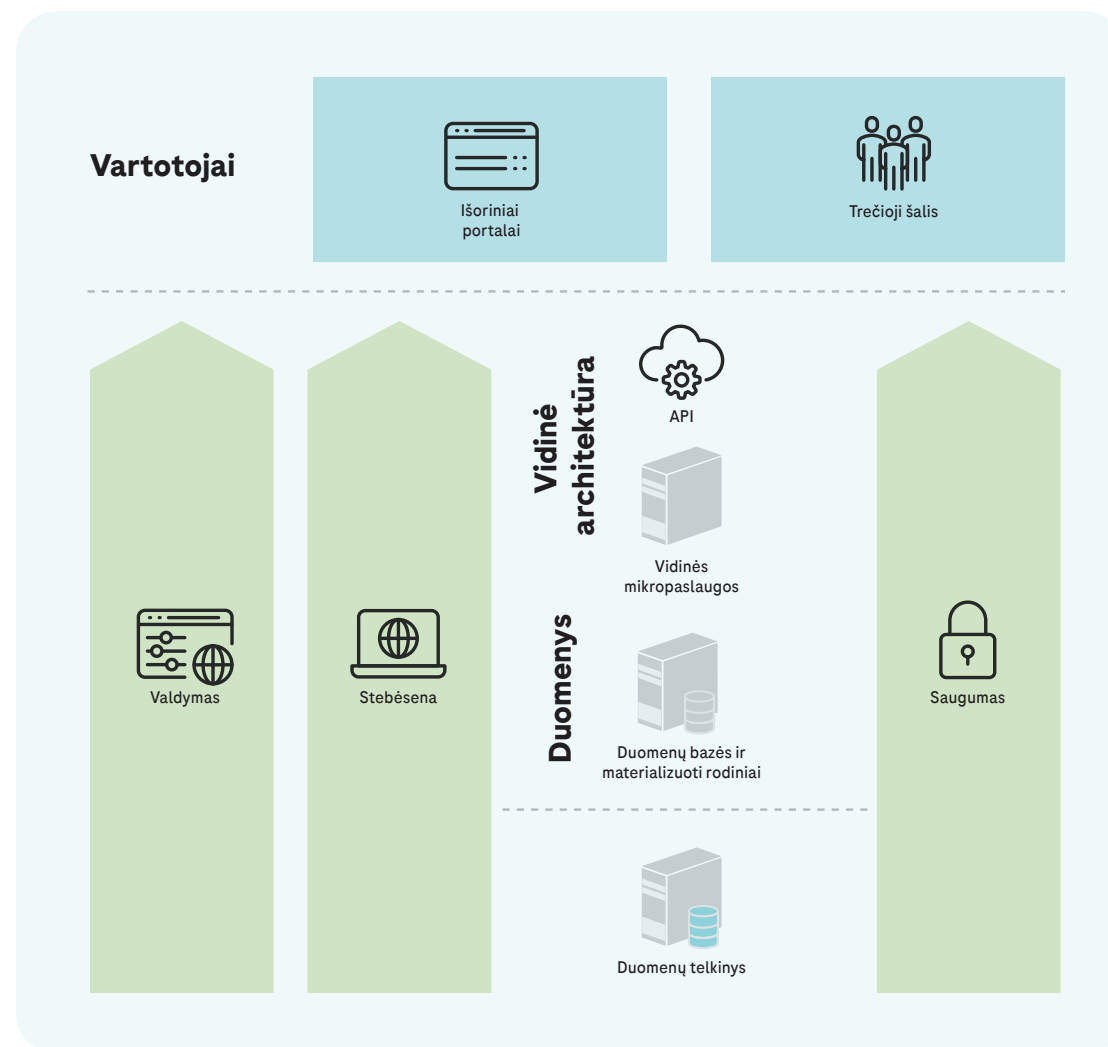

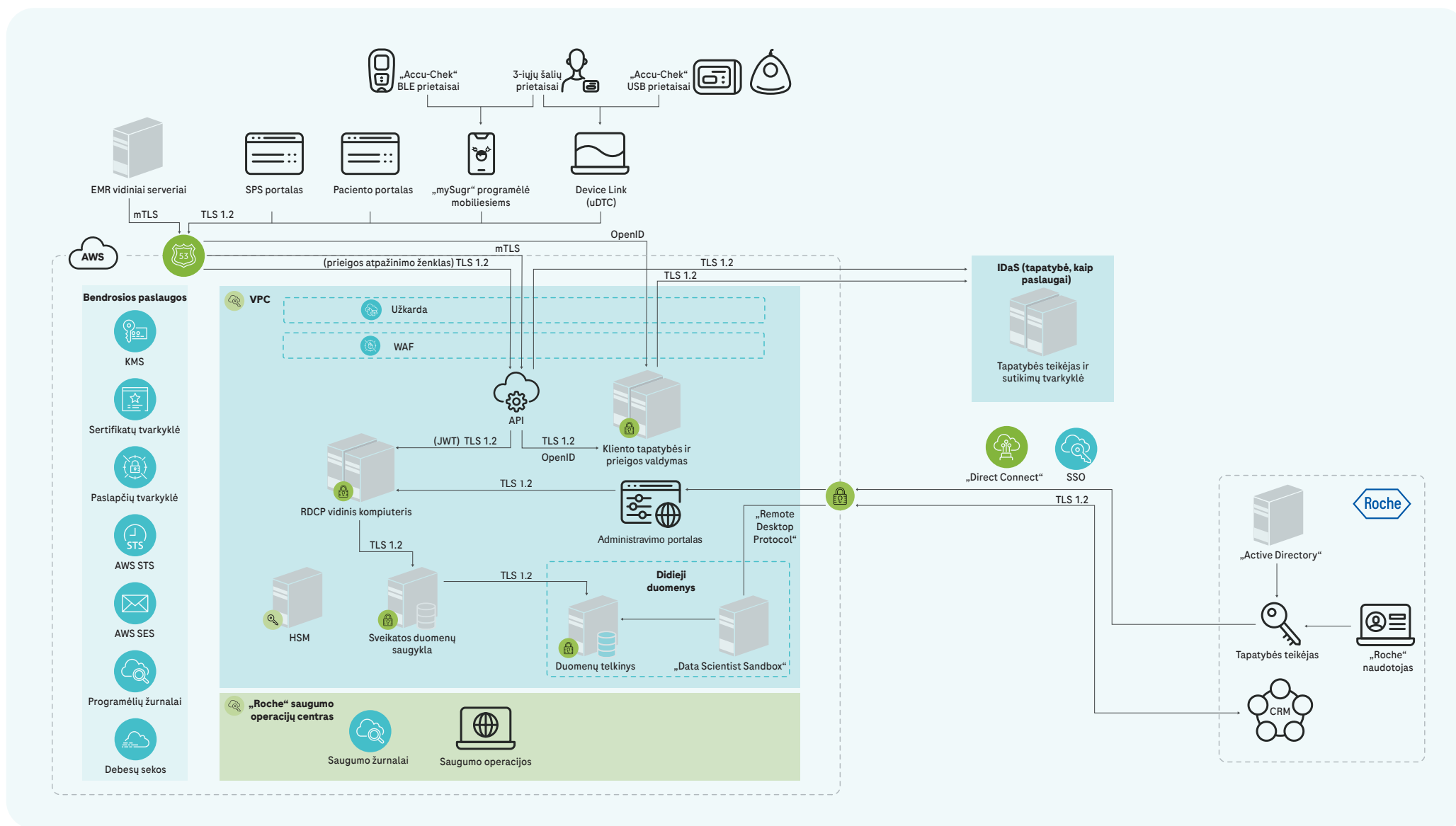

Galimybė teikti individualiai pritaikytą priežiūrą

Daugiau informacijos pateikiama adresu
www.accu-check.lt

ROCHEDIABETES, ACCU-CHEK ir ACCU-CHEK CARE yra „Roche“ priklausantys prekės ženklai.

© 2024 Roche Diabetes Care

UAB „Roche Lietuva“ | Konstitucijos pr. 18B | Vilnius, Lietuva | Nemokama
 Accu-Chek klientų linija 8 800 20011